

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Balkonik statyczny składany

Kod produktu JMC-C 3201/JMC-C 3202




### 1. Wykonanie

Balkonik statyczny składany wykonany jest z podwójnie wzmocnionej aluminiowej anodyzowanej ramy, posiada szerokie pole podparcia. Miękkie piankowe uchwyty zapewniają odpowiednią stabilizację i wygodę używania. Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu użytkownika dzięki regulowanym nóżkom. Gumowe nakładki zapobiegają ślizganiu się. Po złożeniu balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go łatwo przechowywać i przewozić.

#### Elementy balkonika:

- a. uchwyt
- b. klips składania ramy
- c. regulacja wysokości- sztyft blokujący
- d. gumowa nasadka antypoślizgowa

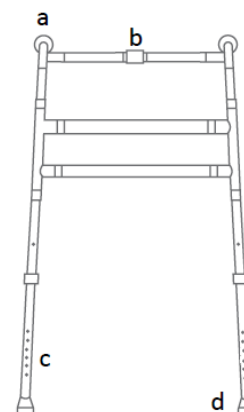

### 2. Zastosowanie

Balkonik statyczny jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

### 3. Montaż

#### Rozłożenie i złożenie balkonika

- Aby rozłożyć balkonik, należy rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów.
- Aby złożyć balkonik, należy docisnąć plastikowy element znajdujący się na środku ramy poprzecznej i złożyć ramiona.

#### Regulacja wysokości

- Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na balkoniku całym ciężarem ciała.
- Aby wyregulować wysokość nóżki, należy wcisnąć metalowy sztyft, wybrać odpowiednią wysokość wewnętrznej rurki, a następnie zablokować położenie rurek względem siebie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

**Uwaga!** Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie.

### 4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	50 cm
Szerokość wewnętrzna	45 cm
Głębokość całkowita	48 cm
Regulacja wysokości	80-96 cm
Waga	2,7 kg
Max obciążenie	136 kg
Kolor ramy	miedziany, srebrny

## 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z balkonika, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## 6. Konserwacja

### Przeglądy

Należy systematycznie wykonywać przegląd wszystkich elementów łączących (zatrzaskowych, zawiasowych) wyrobu, w tym:

- stan sztyftów blokujących do ustawiania wysokości
- sprawdzić stabilność i wygląd ramy nośnej
- stan rurek (pod kątem pęknięć)










### Czyszczenie

- Ramę balkonika należy czyścić wilgotną szmatką, używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów balkonika (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

## 7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.  
Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)

**Dziękujemy za wybór Timago!**



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021